

Agilent SPS 4 and SPS 6 Autosampler

Low Volatile Organic Solvent Rinse Tube Kit Instructions

低挥发性有机溶剂专用冲洗管套件说明书

低揮発性有機溶剤用リンスチューブキット 取扱説明書

Introduction/前言/はじめに

Description: Rinse tube kit for low volatile organic solvents
Part number: G8410-68261

This instruction sheet describes how to route the rinse tube for low volatile organic solvents using this kit for an Agilent SPS 4 and SPS 6 autosampler.

本说明书对使用此套件将低挥发性有机物专用冲洗管安装在 Agilent SPS 4 和 SPS 6 自动进样器上的方法进行说明。

本書では、Agilent SPS 4 および SPS 6 オートサンプラへの低揮発性有機物洗浄チューブの接続方法を説明します。

This kit contains the following parts.

该套件中包含以下零部件。

このキットには、以下のパーツが含まれます。

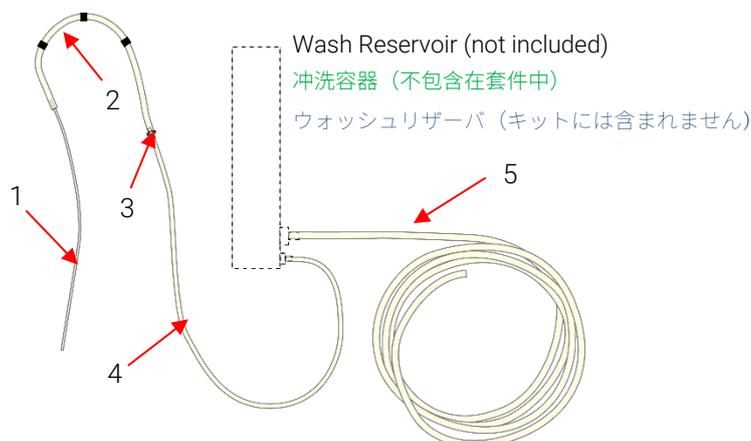


Figure 1. Organic solvent drain tube kit components/套件内容/キット内容

Table 1 Organic solvent drain tube kit components/套件内容/キット内容

Item	Description/说明/説明	Quantity
1	Polyethylene tube 1.5mm x 0.6mm /聚乙烯管/ポリエチレンチューブ	1 m
2	Pump tube Solva, 3 bridged grey/grey /泵管/ポンプチューブ	4 ea
3	Barb connector 2.5mm-1.5mm /联合接头/継手コネクタ	1 ea
4	Solvent resistant tubing 3/32" x 3/16"(2.4mm x 4.8mm) /耐溶剂管/耐溶剂性チューブ	1 m
5	Solvent resistant tubing 3/16" x 5/16"(4.8mm x 8mm) /耐溶剂管/耐溶剂性チューブ	2 m

Procedure/步骤/手順

To route the rinse tubing for low volatile organic solvents, connect the kit components as shown in Figure 1 on the previous page.

如图 1（上一頁）所示，将套件中的零部件连接起来使用。

キットのパーツをFigure 1（前ページ）に示すように接続して、使用します。

This information is subject to change without notice.

Part Number: G8410-90022

© Agilent Technologies, Inc. 2025



G8410-90022

Edition 08/25
Issue 2
Printed in Malaysia

Agilent Technologies Australia (M) Pty Ltd
679 Springvale Road
Mulgrave, VIC 3170, Australia

